

Test de un paso para detección de HBsAg MERISCREEN



MERISCREEN HBsAg es un inmunoensayo rápido y cualitativo de tipo sandwich para la detección del antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAg), un marcador de la infección por hepatitis B en suero o plasma humano

Materiales provistos

A. Dispositivos de prueba empacados individualmente:


1. Un dispositivo de prueba
2. Gotero de plástico desechable
3. Un desecante

B. Inserto del producto.



- Ensayo directo tipo sandwich
- Tipo de muestra: suero/plasma
- Volumen de muestra: 1 gota o 50 ul
- Interpretación de resultados: 20 min
- Almacenamiento: 2 - 30°C
- Sensibilidad analítica: 0.5 ng/mL
- Sensibilidad diagnóstica: > 98%
- Especificidad diagnóstica: > 99.5%

Protocolo del test

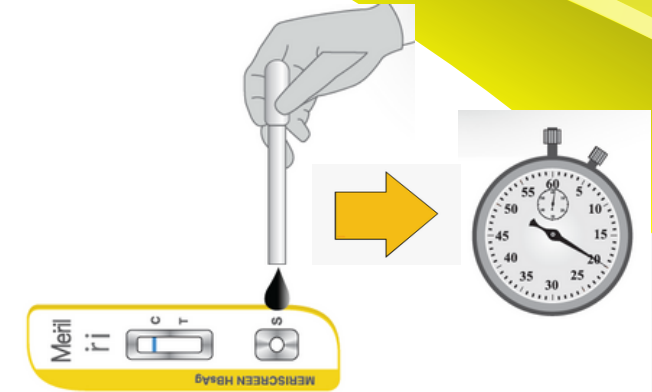

Dispense una gota o 50 ul suero/plasma en el pocillo de muestra

Lectura resultados 20 minutos

Rápida y clara interpretación de resultados

